

Die millimetergenauen und fließenden Bewegungen der MotionStage® ermöglichen es Ihnen, von ganz einfachen und sensibel gesteuerten Bewegungen bis zum anspruchsvollen Rehatraining ein breites und individuell optimiertes Therapiespektrum durchzuführen: von der Raumlageerfahrung über das unterstützte aktive Gang- oder Stehtraining auf einer schiefen Ebene bis zum Neuroathletik-Training.

Mit der MotionStage® bieten Sie Ihren Patient*innen die perfekte Bühne, um sich therapeutische Ziele zu setzen, sie zu erreichen und so die Lebensqualität nachhaltig zu verbessern.

STAGE®



Immer nah am Patienten: einfache und intuitive Bedienung

Während der Therapie wollen Sie sich voll und ganz auf Ihre Patienten konzentrieren und sich nicht mit der Steuerung eines Trainingsgeräts beschäftigen. Deshalb haben wir gemeinsam mit Therapeut*innen ein Fußpanel entwickelt, das die einfache und intuitive Bedienung der MotionStage® ermöglicht. Die gut sichtbaren Piktogramme zeigen sämtliche Funktionen auf einen Blick. Integrierte LED-Leuchtbänder bestätigen die gewählte Funktion bzw. den gewählten Modus. So können Sie die MotionStage® sicher bedienen und haben die Hände für Ihre Patienten frei. Eine Notstopptaste sowie ein unter dem 3D-Gleichgewichts- und Bewegungstrainer angebrachter Notstoppbügel sorgen in jeder Situation für Sicherheit.



Kostenlose Erprobung mit Ihren Patienten

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann sprechen Sie uns bitte an, damit Sie die MotionStage® ausgiebig testen können, auf Wunsch auch in Ihrem Arbeitsumfeld mit Patienten. Wir kommen gerne zu Ihnen und ermöglichen Ihnen, unseren 3D-Gleichgewichts- und Bewegungstrainer live zu testen – natürlich kostenlos.

Gerne empfangen wir Sie auch in unserem modernen Kundencenter in Remscheid, um Sie in die neuen Möglichkeiten des Gleichgewichts- und Bewegungstrainings einzuweihen. Unsere Therapeuten freuen sich darauf, Sie persönlich kennenzulernen. Vereinbaren Sie gleich unter Tel. 02191.209004-20 oder E-Mail info@moso-gmbh.de Ihren persönlichen Erprobungstermin.

Datenblatt MotionStage®	
Abmaße	
Nutzerplattform (L x B)	1.100 x 920 mm
Höhe der Nutzerplattform	Min. 135 mm / Max. 305 mm
Einstiegshöhe	20 mm ¹ - 140 mm
Plattformbeweglichkeit	
Max. Seitenneigung	14° (optional 22°)
Max. Vor- und Rückneigung	14° (optional 30°)
Max. Diagonalneigung	15,5° (optional 25°)
Systemwinkel	28° (optional 60°)
Max. Plattformhub	170 mm
Batterien	
Versorgungsspannung / Kapazität	24 V / 18 Ah
Gewicht	85 kg

¹ bei Neigung der Nutzerplattform

moso®
Bewegung erleben

Motion-Solutions GmbH
Karlstraße 8
D-42897 Remscheid

Tel. +49 2191/209004-20
Fax +49 2191/209004-22

info@moso-gmbh.de
www.moso-gmbh.de



Bühne frei
für das perfekte
3D-Gleichgewichts-
und Bewegungs-
training

motionSTAGE®

Der multi-
funktionale 3D-
Gleichgewichts- und
Bewegungstrainer

Entdecken Sie die völlig neuen therapeutischen Möglichkeiten, die Ihnen die MotionStage® von moso® bietet. Aus der stabilen Grundposition können Sie die MotionStage® in allen Dimensionen bewegen – entweder spontan oder nach einem programmierten Muster. Das gibt Ihren Patient*innen ein sicheres Gefühl und Ihnen die Möglichkeit, von basalen Übungen mit schwerstmehrfachbehinderten Menschen bis zum Rehabilitationstraining von Spitzensportlern ein breites Spektrum an Übungen durchzuführen.

motion

Die MotionStage® lässt sich einfach und schnell für alle Körperhaltungen optimal ausstatten, sodass Ihre Patient*innen jeden Alters sie z. B. im Sitzen, Liegen, Stehen oder im Vierfüßerstand nutzen können – ganz nach Fähigkeiten und Indikation.



„Einzigartiges Therapiegerät“

Die zahlreichen Physiotherapeutinnen und -therapeuten, die bereits Erfahrungen mit der MotionStage® sammeln konnten, sind durchweg begeistert. „Die therapeutischen Möglichkeiten mit der MotionStage® sind sensationell. Ein solches Therapiegerät wünsche ich mir in unserer Klinik“, lautet z. B. das Urteil von Physiotherapeutin Lena Barz.

Spezialisten aus vielen verschiedenen Einsatzgebieten haben bereits die therapeutischen Einsatzmöglichkeiten der MotionStage® bei Patient*innen zwischen 0 und 99 Jahren auf den ersten Blick erkannt (und meistens intuitiv um eigene Übungen ergänzt). Auch die Patient*innen waren begeistert, weil sich bei Ihnen schon nach wenigen Übungseinheiten spürbare Erfolge eingestellt haben.

Überall einsetzbar: macht mobil, ist mobil

Flexibilität ist im therapeutischen Alltag wichtig. Deshalb macht die MotionStage® nicht nur mobil, sie ist es optional auch selbst. Dank eines ausgeklügelten, aber sehr einfach zu bedienenden Mechanismus können Sie die MotionStage® mit nur wenigen Handgriffen und fast ohne Kraftaufwand an jeden beliebigen Ort bringen: innerhalb der Praxis, ins Patientenzimmer,

in die Sporthalle (z. B. an die Sprossenwand oder unter den Barren) oder wo auch immer Sie damit arbeiten wollen. Da die MotionStage® von starken Akkus betrieben wird, kommt sie einen kompletten Therapietag ohne Stromanschluss aus. So haben Sie die Flexibilität, die Sie brauchen, um optimal arbeiten zu können.

Ihre Bühne für grenzenlose Ideen
Die MotionStage® hat sich als Kreativitätsmotor für Ergo- und Physiotherapeut*innen entpuppt. Viele Übungen auf unserem 3D-Gleichgewichts- und Bewegungstrainer lassen sich nämlich durch Zubehör ergänzen, das Sie ohnehin täglich nutzen: (Gymnastik-) Bälle, Therabänder, Gewichte, Gymnastikstäbe und vieles mehr. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und erweitern Sie die therapeutischen Möglichkeiten der MotionStage® durch Ihre ganz persönlichen Ideen.




motionSTAGE

Mit Hilfsmittel auf der MotionStage®

Gleichgewichtstraining ist auch und besonders für Rollstuhlfahrer wichtig. Sie können die MotionStage® nutzen, ohne ihr Hilfsmittel verlassen zu müssen. Auf Wunsch stellen wir unseren multifunktionalen 3D-Gleichgewichts- und Bewegungstrainer mit den passenden Befestigungen aus, um einen Rollstuhl oder einen Stehtherapie-trainer, z. B. von EasyStand, sicher darauf zu fixieren. Durch dieses Training werden ganz neue Reize gesetzt, die den Gleichgewichtssinn über das gewöhnliche Rollstuhl- bzw. Stehtraining hinaus aktivieren und eine propriozeptive Förderung ermöglichen. Das kann in einigen Fällen ein wichtiger Schritt zum eigenständigen Stehen und Gehen sein.

Die wesentlichen Merkmale der MotionStage

- Kontrollierte, millimetergenaue und fließende Bewegungen in drei Dimensionen
- Stabile Grundposition für maximales Sicherheitsgefühl
- Einfache, intuitive Bedienung durch Therapeut*in
- Leitungsloser Ganztagsbetrieb durch starke Akkus
- Beliebige, einfache Positionierung der MotionStage® durch integrierte Rollen
- Therapie in sämtlichen Körperhaltungen möglich (ggf. mit Unterstützung)
- Förderung der motorischen Entwicklung: sitzen, drehen, krabbeln, stehen, gehen usw.
- Basale und propriozeptive Förderung durch Wahrnehmungs- und Raumlageerfahrung
- Psychomotorische Trainingsmöglichkeiten
- Neuroorthopädische Rehabilitationsmöglichkeiten
- Training von Gewichtsverlagerung vor, zurück und seitlich
- Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Anwendungsspektrum von schwerstmehrfachbehinderten Menschen bis zu Rehabilitanden

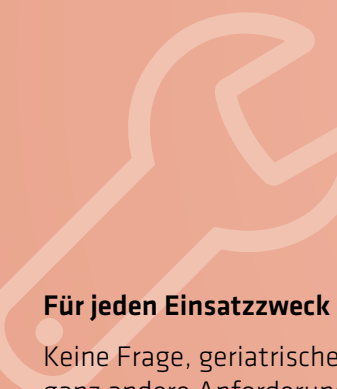

Für jeden Einsatzzweck individuell anpassbar

Keine Frage, geriatrische Patient*innen haben z. B. ganz andere Anforderungen an ein Therapiegerät als Sportler. Unsere MotionStage® wird diesen unterschieden gerecht, indem sie sich optimal an die jeweiligen Anforderungen anpassen lässt. Je genauer Sie uns sagen, welche Ausstattungsmerkmale Sie benötigen, desto individueller können wir unseren 3D-Gleichgewichts- und Bewegungstrainer für Sie optimieren. Unter anderem können wir folgende Anpassungen für Sie vornehmen. Bitte sprechen Sie uns an!

- Höhe und Festigkeit des Polsters (um z. B. das Umsetzen aus dem Rollstuhl zu erleichtern)
- Haltegriffe bzw. umlaufender Handgriff für mehr Sicherheit
- Auflagen (Nest) für liegende Anwendungen mit schwerstmehrfachbehinderten Menschen
- Befestigungsmöglichkeiten für andere Hilfsmittel wie Rollstühle oder Stehtherapietrainer von EasyStand
- Rollen zum mobilen Einsatz der MotionStage®

Mögliche Nutzer*innen der MotionStage® sind:

- Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters.
- Menschen in physio- oder ergotherapeutischer Behandlung von schwerstmehrfachbehinderten Kleinkindern bis zu erwachsenen neurologischen bzw. orthopädischen Rehabilitanden.
- Menschen, die durch bewegte Lagerung in besonderer Weise unterstützt werden.
- Menschen, für die eine stabile Grundlage elementare Voraussetzung für die Akzeptanz jeder Therapie ist.
- Menschen, bei denen millimetergenaue Positionsveränderungen therapeutisch angeraten sind bzw. von denen nur solche angenommen werden.
- Privatpersonen zur Optimierung ihrer individuellen Therapie.
- (Spitzen-)Sportler zur Rehabilitation von Verletzungen.
- Menschen, die durch Neuroathletik-Training ihre Leistungsfähigkeit optimieren wollen.